



Backup Centralx Clinic através do SQLYog

1. Abra o **SQLYog** e clique em **“Connect”**.

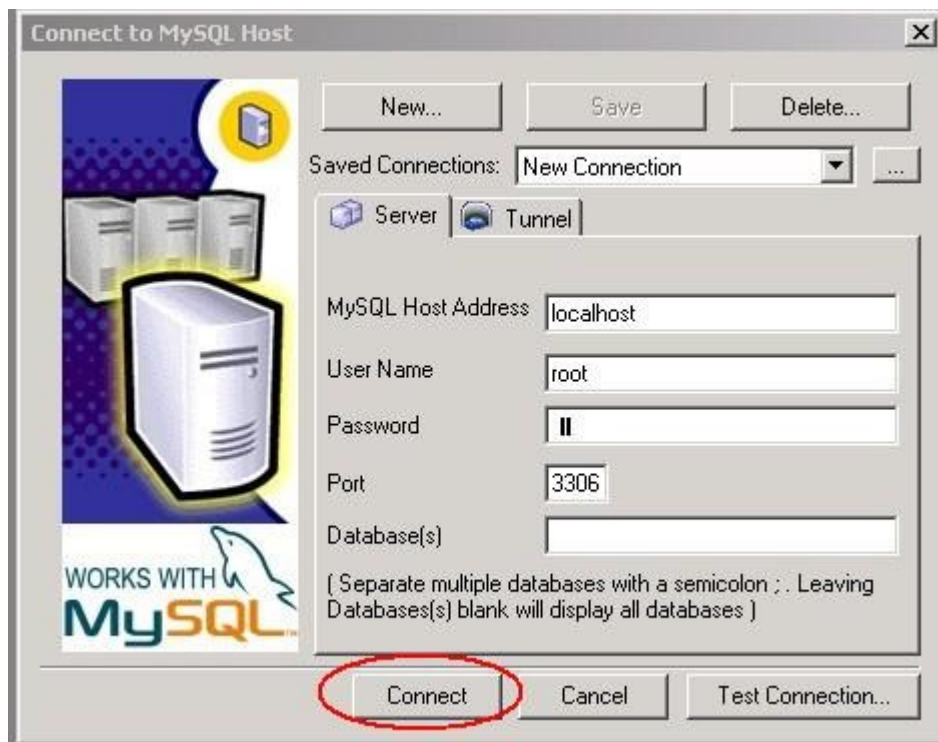


2. Na parte esquerda da tela, clique em **hidocor** e confirme se será exibido na parte direita inferior, os itens da base de dados como abaixo.

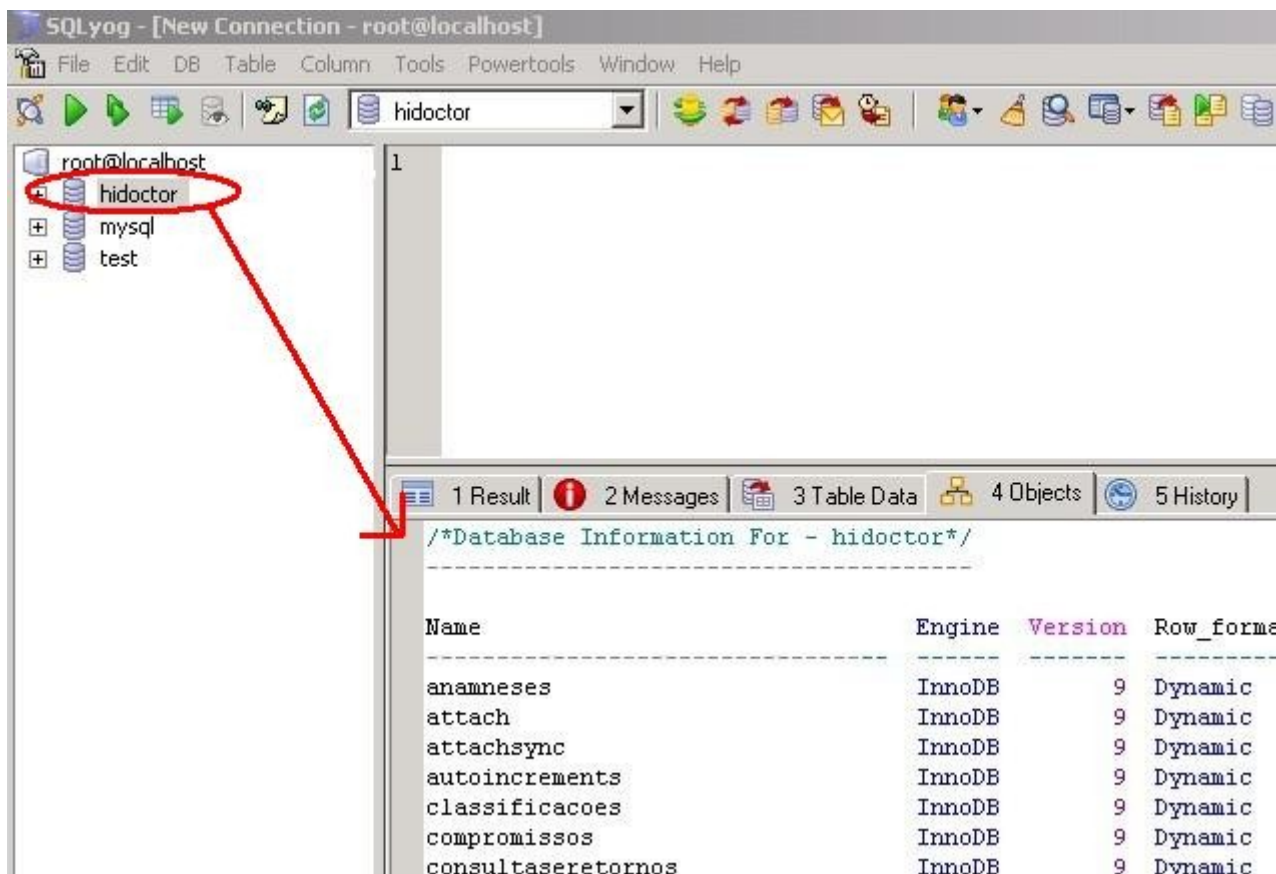


3. Clique em “Tools / Export Database As SQL Dump”.



4. Em “Export to file” modifique o nome do arquivo colocando a data corrente, em seguida clique em “Export”.

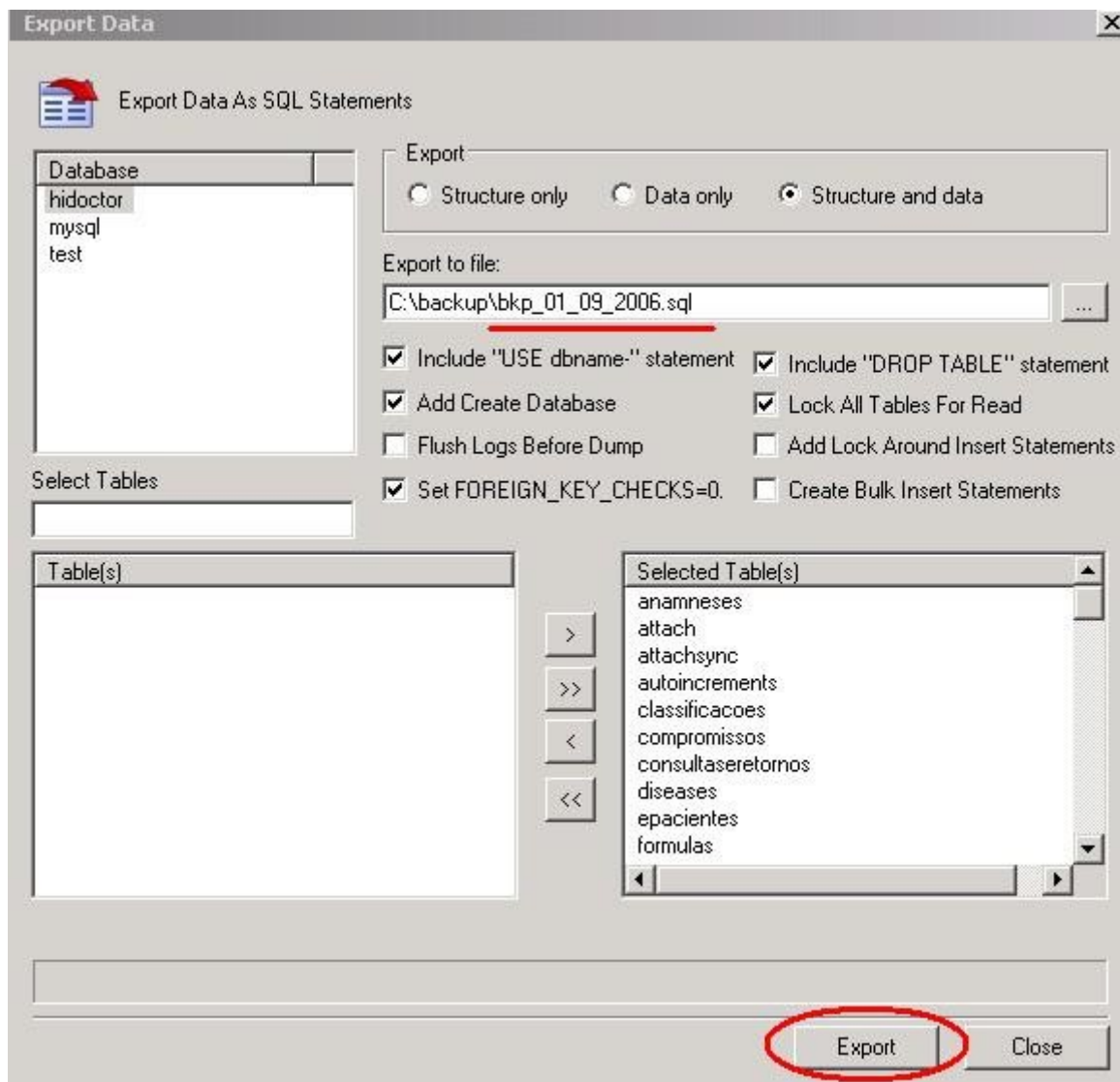

5. Aguarde a mensagem “Export Sucessfull” e clique em “Close”

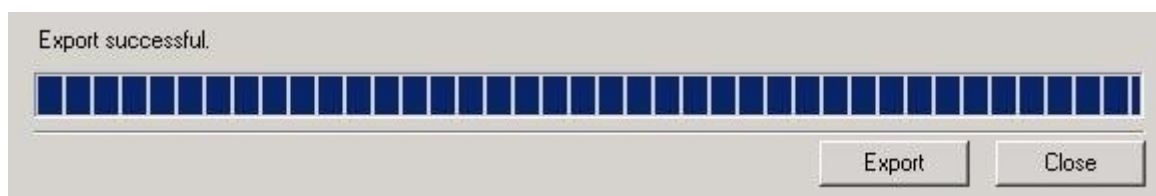

6. Se desejar ir além e salvar este **backup** fora de seu computador (em um CD, DVD ou até mesmo em outro PC), abra a pasta onde está salvo o arquivo “data corrente.sql” e faça a cópia do arquivo.